

Harmony XL PRO

Un espectro de soluciones



UNA ORQUESTACIÓN INTELIGENTE CONDUCE A UNA MEJOR ARMONÍA

ClearLift + ClearSkin para pieles perfectas

Dye-VL & Cooled LP Nd:YAG para una cobertura completa de las lesiones vasculares

Dye-SR & ClearLift Nd:YAG para el tratamiento de pigmentación

01 Combinación perfecta para la piel

Rejuvenecimiento y aclaración con ClearLift y ClearSkin



La terapia combinada ofrece una solución de amplio espectro para las necesidades de los pacientes que buscan una solución para las imperfecciones de la piel relacionadas con la edad, como arrugas, líneas finas, tono de piel desparejo y laxitud y cicatrices provocadas por el acné. Gracias al valor sinérgico del uso de dos duraciones de pulsos y longitudes de onda diferentes, la terapia combinada utiliza ClearLift (QS 1064 nm-fotoacústico) y ClearSkin (ER: Glass 1540 nm – fototérmico) para posibilitar el rejuvenecimiento de la piel a través de la inducción de nuevo Colágeno tipo III (ClearLift) y lograr un efecto de Colágeno tipo I (ClearSkin).

ClearLift utiliza los poderosos beneficios de un láser Q-Switched fraccional no ablativo de alta intensidad para el tratamiento de las imperfecciones de la piel. Logra un profundo efecto mecánico centrándose en la energía debajo de la epidermis y provocando una herida dérmica controlada dejando la epidermis intacta. El proceso de sanación de la herida estimula el desarrollo de nuevo colágeno, además de contracturar y tensar el tejido.


ClearSkin es la primera tecnología en combinar un láser no ablativo con una tecnología de vacío y enfriamiento de contacto simultáneos para el tratamiento del acné común en forma segura y efectiva. El láser penetra profundamente en la piel y provoca un daño térmico a las glándulas sebáceas, destruye la bacteria P. del acné y además reduce la producción de sebo, dejando la epidermis intacta.

El mecanismo de vacío integrado extrae el material sebáceo acumulado en los poros, mientras que el enfriamiento de contacto protege la piel y reduce así el dolor permitiendo un tratamiento más seguro y efectivo de las glándulas sebáceas dentro de la dermis.

El complemento de ambas técnicas le ofrece la oportunidad de tratar varias combinaciones de molestias, ya que ambas tecnologías funcionan de manera independiente y se respaldan recíprocamente para obtener resultados óptimos.



Antes

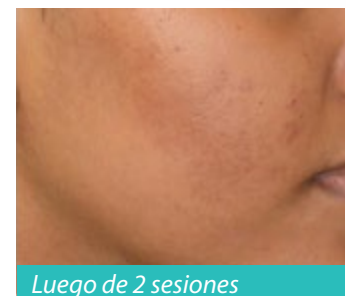

Luego de 2 sesiones

Cortésia de: Profesor Ganesh Pai, Médico, Director Médico, DERMA-CARE Skin & Cosmetology Centre, Mangalore, India

02 Cobertura completa de diversas lesiones vasculares



Tratamiento de lesiones vasculares de diversas profundidades y diámetros con Dye-VL y Cooled-LP Nd: YAG

El tratamiento de lesiones vasculares presenta un desafío en materia de cobertura, ya que las condiciones del paciente por lo común requieren un tratamiento para lesiones de diversos tamaños y profundidades. La integración de una técnica combinada, la unión de las tecnologías Dye-VL de 500-600 nm y Cooled LP de 1064 nm Nd: YAG, garantiza una mayor cobertura para tratar efectivamente una amplia variedad de lesiones vasculares de diferentes tamaños o profundidades.

Dye-VL es de vanguardia con su exclusiva tecnología "In-Motion" para una mayor seguridad y confort, una vida útil más prolongada de su aplicador y resultados clínicos óptimos, mientras que Cooled-LP Nd:YAG asiste en el tratamiento de vasos sanguíneos más grandes (entre 0,5 y 3 mm de diámetro) a una mayor profundidad en la piel.

El resultado clínico es una solución completa, integral e inclusiva para una amplia diversidad de pacientes.



Antes



Después de 1 sesión

Cortesía: Departamento Clínico Alma

Beneficios de la combinación

- Combina 2 técnicas no agresivas en una sola sesión
- Mayor confort y seguridad para el paciente
- Mejores resultados clínicos
- Protocolos personalizados para el paciente
- Sin tiempo de inactividad

“El uso de ClearLift y ClearSkin combinados en pacientes es mucho más efectivo ya que muchos pacientes tienen una combinación de piel envejecida y acné, ya sea activo o uno que ha dejado cicatrices. Antes de cada tratamiento, puedo evaluar la piel del paciente y definir el protocolo correcto para decidir la mejor combinación. Además, cuento con la libertad de alternar durante el tratamiento, lo cual conduce en última instancia a un mejor cutis”.

- Uwe Paasch, Médico, Doctor en Medicina, Departamento de Dermatología, Universidad de Leipzig, Alemania.

03 Combinación para el tratamiento de la pigmentación

Solución combinada para todas las sombras y capas: Dye-SR y ClearLift 1064 nm Nd:YAG



Esta combinación ofrece una amplia cobertura para diversos tipos de lesiones pigmentadas localizadas en todas las capas de la piel, incluidas las tonalidades de piel oscuras.

Dye-SR se basa en la tecnología AFT patentada de Alma y un espectro de banda angosta para el tratamiento preciso de lesiones pigmentadas, centrándose en las lesiones superficiales. El láser Q-Switched Nd:YAG de 1064 nm de alta potencia (ClearLift) trata las lesiones pigmentadas profundas y ofrece una solución efectiva para las más profundas.

Esta solución complementaria es una excelente combinación al tratar a pacientes con varios tipos de lesiones pigmentadas, y combatir con efectividad la diversidad de lesiones pigmentadas en solo uno o dos tratamientos.



Antes



Luego de 3 sesiones

Cortesía del Departamento Clínico Alma



“La pigmentación es un verdadero problema para algunos pacientes, en especial porque sus lesiones pigmentadas por lo general se localizan en diferentes profundidades de la piel y una tecnología no siempre puede cubrirlas todas. Debido a que combino las tecnologías Dye-SR y QS 1064 nm Nd:YAG, compruebo una verdadera diferencia en mi efectividad. Básicamente este es un método mucho mejor para abordar el problema de la pigmentación. Es una solución única con un gran alcance”.

- Profesor Ganesh Pai, Médico, Director Médico, DERMA-CARE Skin & Cosmetology Centre, Mangalore, India.



“Descubrí que la combinación de ClearLift y ClearSkin me permite aprovechar lo mejor de ambas tecnologías. Mi trabajo es mucho más efectivo y sé qué tratamiento es más adecuado para cada persona. Cada longitud de onda tiene su beneficio, y cuando las utilizo juntas sé que mis pacientes reciben un mejor tratamiento. Esto es importante para mí y lógicamente, para mis pacientes”.

- Profesor Moshé Lapidot, Médico, Dermatólogo, Jefe de la Unidad Láser, Departamento de Dermatología, Rabin Medical Center.

APROVECHE AL MÁXIMO SU ARMONÍA



Harmony XL Pro es una poderosa plataforma de varias aplicaciones diseñada para el tratamiento de varias indicaciones y ofrece el espectro completo de luz pulsada y tecnologías láser, aplicadores y métodos de tratamiento. El sistema ofrece tratamientos altamente efectivos, confiables y seguros para muchos problemas de la piel que presentan desafíos y cubre todas las zonas y tipos de piel.


Muchos profesionales ya comenzaron a beneficiarse de una **efectividad notablemente mejorada** al combinar estas tecnologías en el tratamiento de diversos síntomas de los pacientes. Ahora puede incrementar el valor de su plataforma al integrar un enfoque de uso combinado: aprovechar las combinaciones tecnológicas para maximizar su potencial clínico.



TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS. ENFOQUE PERSONALIZADO.

La plataforma Harmony XL Pro consiste en varios módulos que ofrecen soluciones poderosas para los principales problemas cutáneos, ya que cada uno de ellos puede tratarse utilizando una única tecnología o una combinación de tecnologías y enfoques de tratamiento, según los requisitos clínicos.

Se pueden combinar los tratamientos para aumentar la efectividad y ofrecer una solución personalizada para las diversas necesidades de los pacientes. Esta **capacidad modular sinérgica** le ofrece mayor flexibilidad y le confiere mayor poder al incorporar una **práctica médica inteligente y personalizada** mientras **promueve su eficiencia comercial**.

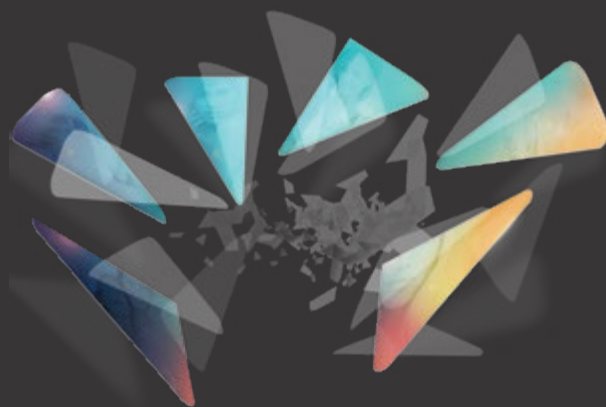

Alma
Harmony XL PRO
Un espectro de Soluciones

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Núremberg, Alemania
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99
info@alma-lasers.de
www.almalasers.com

© 2018 Alma Lasers Ltd.
Todos los derechos reservados. Alma Lasers, su logotipo, Alma,
ClearLift, ClearSkin, Dye-VL, Harmony, Dye-SR, AFT son marcas y/o
marcas registradas de Alma Lasers en Estados Unidos y/u otros países.
info@almalasers.com
www.harmonyxlpro.com

Contacte con
Alma Lasers

