

Alma Hybrid™

MASTER YOUR CRAFT



2021 WINNER
**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

www.productdesignaward.eu

IDA
DESIGN
AWARDS
BRONZE
WINNER
2021

AMWC
Aesthetic Medicine
AWARDS


Winner



Presentamos

Alma Hybrid™

Con un profundo aprecio por su arte, la precisión que este requiere y los años de experiencia invertidos en perfeccionarla verdaderamente, Alma creó la herramienta definitiva a fin de garantizar que usted cuente con lo necesario para lograr una verdadera transformación, que haga que las personas se sientan y se vean mejor día tras día.

ALCANZAR EL EQUILIBRIO



Optimizada y ultramoderna, tanto en diseño como en capacidades, la elegante Alma Hybrid™ adopta un enfoque de vanguardia para abordar los tratamientos dermatológicos médicos y estéticos.

Con base en la tecnología desarrollada internamente por nuestro reconocido equipo de innovación profesional, Alma Hybrid es la **primera y única herramienta de su tipo que reúne 3 energías poderosas**, la cual brinda resultados incomparables con un tiempo de inactividad significativamente reducido.

Al ofrecer opciones ilimitadas y un máximo control, que va mucho más allá del láser fraccionado estándar, Alma Hybrid le permite determinar todos los aspectos del tratamiento a fin de obtener un **concepto completamente nuevo y nunca antes visto de rejuvenecimiento de la piel, tratamiento de cicatrices y bienestar femenino**.

Existe una línea delgada entre la belleza natural y la belleza realzada. Nuestra misión es encontrar el equilibrio entre respetar y honrar lo natural, mientras ofrecemos mejoras que empoderan a las personas y las hacen sentir más felices y seguras.



Con Alma Hybrid, le proporcionamos el santo grial de los tratamientos estéticos: la posibilidad de brindar un efecto máximo, con un tiempo de inactividad mínimo.



UNA COMBINACIÓN GANADORA

Diseñada para una amplia gama de tratamientos ablativos y no ablativos, Alma Hybrid combina el poder de 3 energías principales, a fin de crear un efecto clínico único.

CO₂

Láser de CO₂

La combinación óptima del efecto ablativo y coagulativo para tratamientos con láser fraccionado o focalizado de alta precisión y eficacia.

1570

Láser de 1570 nm

Un potente láser no ablativo para crear un efecto térmico que favorece la síntesis de nueva dermis, mientras mantiene la epidermis intacta.

IMPACT

IMPACT™ para la liberación transepidérmica (TED)

Nuestra tecnología de ultrasonido patentada crea una presión acústica que mejora la liberación transepidérmica en la piel, a través de los microcanales creados por el láser de CO₂.


Además de esta poderosa combinación, el software inteligente sirve como una herramienta que beneficia tanto al médico como al paciente al permitir una matriz de opciones, entre las que se incluyen el tipo de piel, el área que se tratará y otros parámetros, y así garantizar que cada tratamiento sea totalmente personalizado para cada paciente.

HERRAMIENTAS DE UN MAESTRO

HyGrid™ Personalizado a la perfección

El elemento esencial de la plataforma Alma Hybrid es HyGrid, una función exclusiva de Alma que garantiza el máximo beneficio a partir del efecto de nuestra combinación única de tecnología.


Hasta ahora, los dispositivos láser médicos y estéticos del mercado han creado microcanales en la piel que son ablativos o no ablativos. HyGrid es seguro, preciso y versátil, y le brinda el beneficio tanto del láser de CO₂ como el de 1570 nm en un solo aplicador, lo que le permite programar a su medida la relación entre la ablación y no ablación de la piel, en una matriz de las proporciones precisas necesarias para equilibrar de manera óptima los resultados y el tiempo de inactividad de cada paciente, según sus necesidades personales.

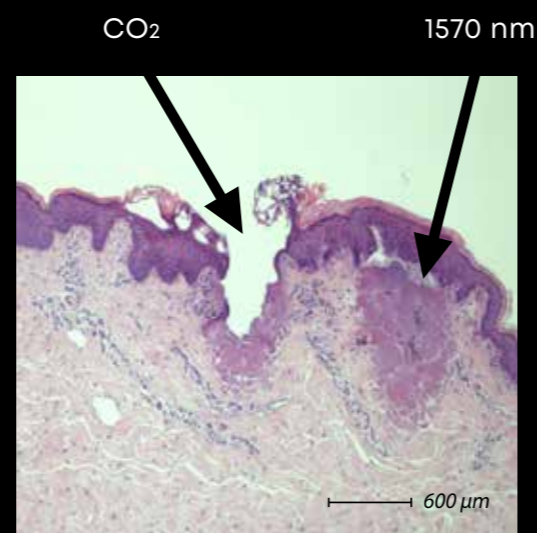


CO₂ y láser adyacente de 1570 nm: histología ex vivo

Dado que ambas longitudes de onda del láser tienen su propio efecto óptimo en la piel, los tratamientos que las combinan son altamente eficaces, adecuados incluso para los tipos de piel más oscura. Las relaciones de HyGrid pueden personalizarse para minimizar el tiempo de inactividad.


1:1

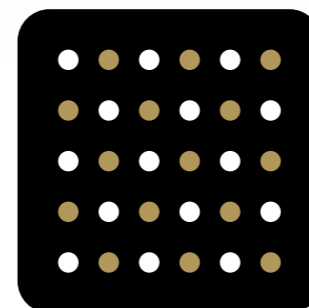

1:2

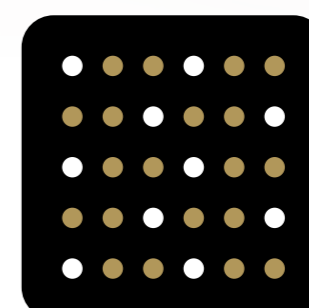

2:1

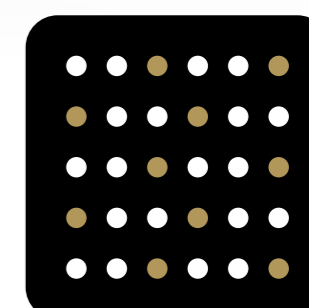

Ejemplos de relaciones de láser personalizadas

● - Láser 1570 ● - Láser CO₂

Nuestros esfuerzos se centran en comprender los elementos que moldean la manera en que las personas viven hoy, sus necesidades diversas y sus deseos cambiantes. Con este entendimiento hemos creado HyGrid™, con el cual puede crear protocolos equilibrados para brindar tratamientos particulares adecuados para cada cliente específico.



ProScan: herramientas de un maestro


ProScan: nuestro aplicador insignia

Con el objetivo de aprovechar plenamente las capacidades de HyGrid™, Alma creó el escáner ProScan automatizado y altamente avanzado. Al crear rayos láser enfocados, secuenciales, ultrarrápidos y alineados, el escáner ProScan, ligero y de diseño ergonómico, tiene un efecto que es a la vez ablativo y coagulativo.

Además de un motor de escaneo galvanométrico y espejos, ProScan tiene una punta refrigerada para mejorar la seguridad del tratamiento y la comodidad del paciente. Al permitir una personalización completa y una cobertura rápida de superficies grandes, el aplicador ofrece una variedad de diferentes formas y modos de escaneo.

«El revolucionario modo HyGrid me permite personalizar la proporción óptima entre tratamientos ablativos y no ablativos, y maximizar el efecto de cada láser. Esta característica única garantiza que mis tratamientos se adapten a las necesidades individuales de cada paciente, lo que genera mejores resultados. Considero que este es un progreso sustancial en términos de la personalización de tratamientos con láser para la piel.»

Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, jefe del Centro de Dermatología Estética, Centro Médico Sourasky, Tel Aviv, Israel

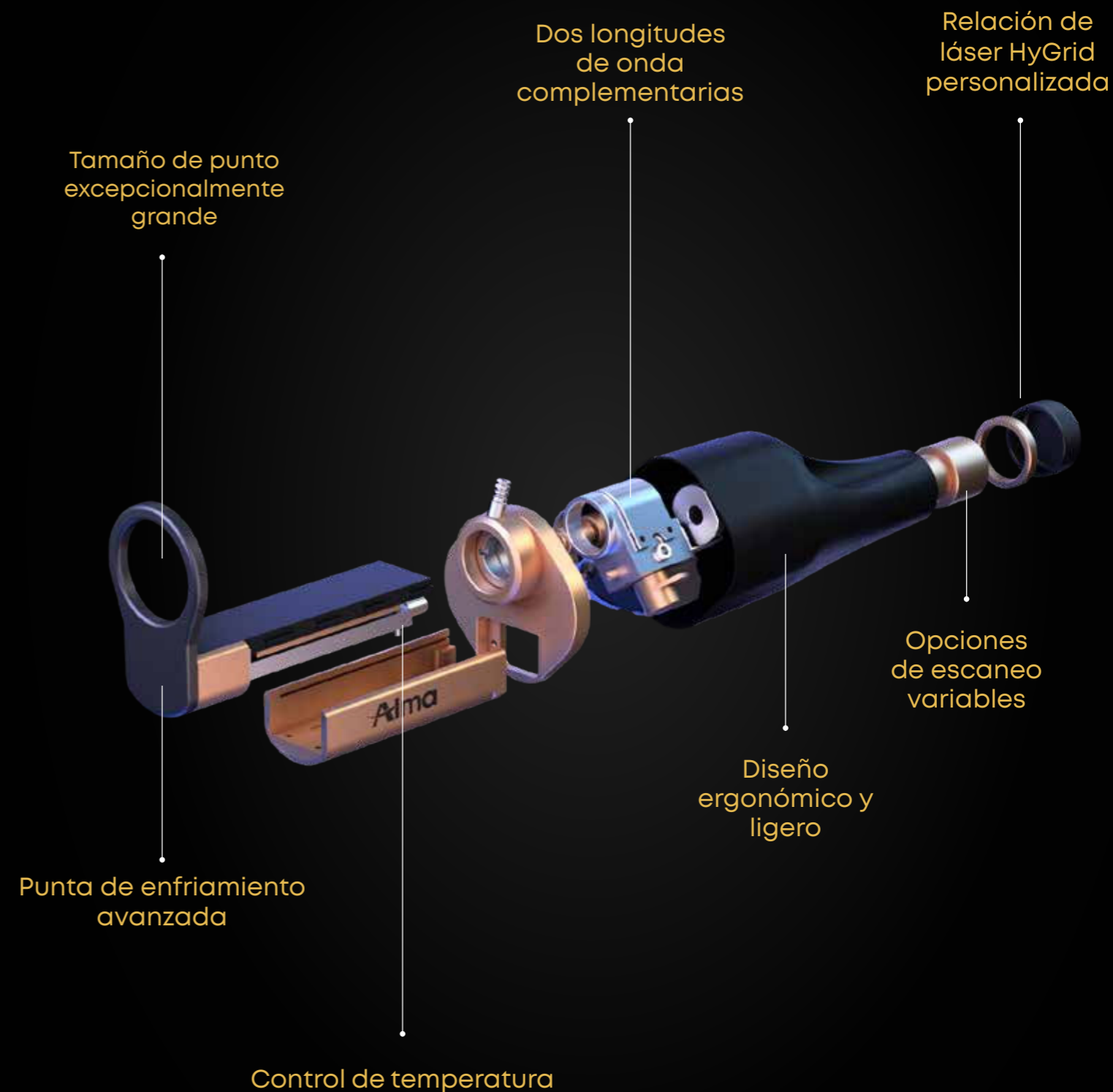

Una sola plataforma. Una multitud de tratamientos.



Alma Hybrid es una plataforma única que le permite ofrecer a los pacientes los tratamientos personalizados de rejuvenecimiento de la piel y de bienestar femenino que desean, con un control completo del tiempo de recuperación para satisfacer las necesidades de cada paciente.

La metodología innovadora empleada por Alma Hybrid engloba 3 elementos esenciales: la ablación óptima para una restauración perfecta; un efecto térmico profundo definitivo para la síntesis de colágeno nuevo, y una liberación transepidermica, con efectividad sin precedentes, de los elementos esenciales para la piel.

Los cuatro tratamientos líderes de Alma Hybrid:



Hybrid Lift

Tratamiento de renovación estupendo

Este tratamiento, que combina lo mejor de la tecnología ablativa y térmica con la liberación mejorada de productos cosméticos, produce resultados incomparables, mientras que requiere un tiempo de inactividad relativamente corto. El patrón de escaneo único de los láseres de CO₂ y de 1570 nm induce la contracción de la piel y la neocolagénesis, al tiempo que el ultrasonido IMPACT™ maximiza los resultados mediante su capacidad comprobada para aumentar la liberación transepidermica.

Hybrid Lift brinda resultados espectaculares en la piel, con un aspecto y una sensación más suave y juvenil. Los efectos del tratamiento incluyen una mejora visible de la textura de la piel, las líneas finas y las arrugas.

Antes

**Después de
9 semanas**



Cortesía de la Dra. Sarah Boxley, Australia



Hybrid OScar

Tratamiento de cicatrices

OScar es el tratamiento definitivo para la reparación de queloides y cicatrices hipertróficas. El éxito de un tratamiento de cicatrices depende de la penetración del láser en la capa de la dermis. Gracias a la combinación de las longitudes de onda láser de 1570 nm y de CO₂, puede personalizar diferentes parámetros, como la profundidad de penetración, el ancho de coagulación y la densidad, a fin de personalizar un protocolo óptimo para cada cliente y para cada tipo de cicatriz en tratamiento.

El tratamiento con IMPACT favorece la administración transepidérmica y mejora los resultados generales.

Antes

**Después de
5 sesiones**



Cortesía del Prof. Ofir Artzi, Israel

“Lo que más me gustó y lo que atrajo mi interés hacia Alma Hybrid fue el sistema de aplicación transepidérmica de medicamentos. Nos encanta aprovechar los orificios que hacen los láseres en la piel para trabajar mejor. Con la mayoría de nuestros tratamientos, siempre estamos pensando qué podemos hacer después del láser para mejorar los resultados... El cabezal Impact ayuda a masajear los tópicos para que penetren más profundamente en la piel y también permite que la aplicación sea más uniforme, por lo que se obtiene un muy buen efecto.”

Dr. John Sullivan, especialista en dermatología, Australia



SoftLift

Tratamiento de rejuvenecimiento a la hora del almuerzo

SoftLift contrae las líneas finas y las arrugas leves y mejora la laxitud de la piel, logrando un tono de piel juvenil con un tiempo de inactividad mínimo. Al crear un efecto térmico significativo, el poderoso láser no ablativo de 1570 nm promueve la neocolagénesis, mientras deja intacta la epidermis. El tratamiento es adecuado y seguro para el rostro, el cuello y el escote, incluso en los tipos de piel más oscuros*.

*Clínicamente comprobado para los tipos de piel II a V.

Antes

**Después de
3 sesiones**



Cortesía del Dr. Munir Somji, Reino Unido


CO₂

FemiLift

Optimización del bienestar femenino

FemiLift es adecuado para el tratamiento seguro, eficaz y mínimamente invasivo de múltiples indicaciones ginecológicas y de salud femenina, incluido el nuevo y lucrativo mercado de la remodelación vaginal*.


Indicaciones:

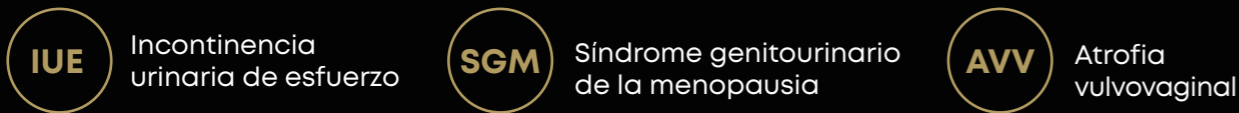

Los beneficios clínicamente comprobados incluyen la reducción de la sequedad, el picor y el ardor, junto con el aumento del grosor del epitelio vaginal. Además, ayuda a reducir el dolor durante el coito y mejora la función sexual.

Aplicador FemiLift:

- Diseñado para adaptarse a distintos tamaños de vagina** y garantizar así la máxima comodidad de la paciente
- Rotación de 360 grados para una cobertura óptima
- Les permite a las pacientes retomar rápidamente sus actividades diarias

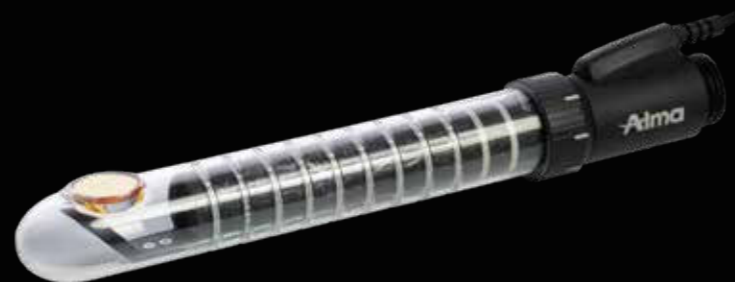


* ROW

**El aplicador FemiLift Slim está disponible para mujeres con estructuras anatómicas más estrechas.

Tecnología de vanguardia

FemiLift cuenta con la potencia, la precisión y la versatilidad del láser de CO₂, ampliamente aceptado como el estándar de oro de la ginecología. La energía del láser de CO₂ se aplica al tejido vaginal a través de un elemento óptico difractivo (DOE, por sus siglas en inglés) que divide el haz en 81 píxeles microscópicos, en un patrón de 9 x 9.

Se logra una ablación fraccionada suave junto a un efecto térmico significativo, lo cual permite penetrar profundamente en la submucosa y al mismo tiempo dejar intacto el tejido circundante. Esto promueve un proceso de cicatrización más rápido, y estimula la neocolagénesis para favorecer la regeneración de los tejidos.

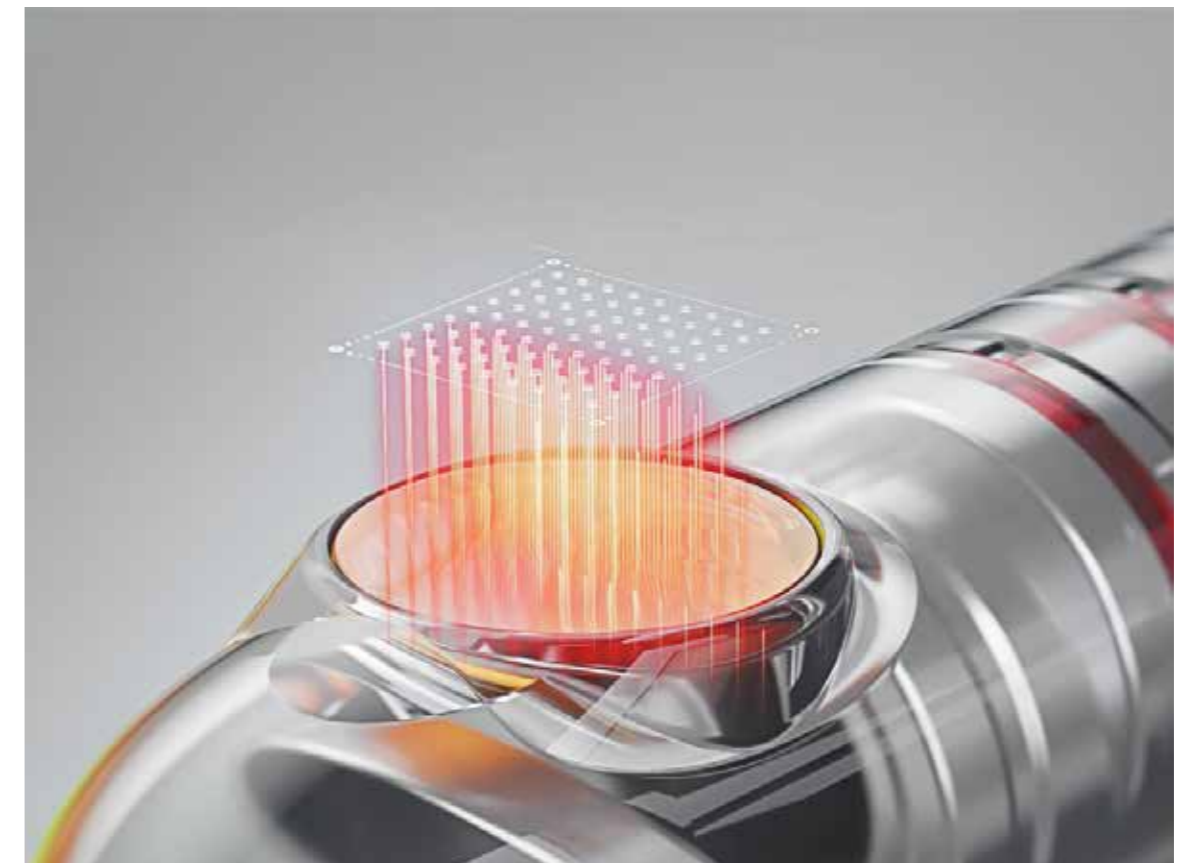

«FemiLift es un tratamiento médico ambulatorio novedoso, con excelentes resultados, que está abriendo el camino a nuevas opciones de tratamiento quirúrgico ambulatorio seguras y eficaces.»

Prof. Paolo Scollo, Presidente de S.I.G.O., Italia

¡LOGRE UNA VERDADERA
TRANSFORMACIÓN,
**QUE HAGA A LAS
PERSONAS SENTIRSE Y
VERSE MEJOR, CADA DÍA!**



Alma Hybrid™

MASTER YOUR CRAFT

Como una empresa líder en el campo de la estética médica, les brindamos a miles de médicos la posibilidad de ayudar a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada persona que acude a su consulta. En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los pacientes esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. Cuando nuestra solución está en sus manos, esa promesa se hace realidad.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de los aplicadores y las indicaciones clínicas pueden variar en función de las aprobaciones normativas locales. Consulte con su representante local de Alma para obtener información específica de su región.

www.almalasers.com

© 2025 Alma. Todos los derechos reservados.

Alma, su logotipo, Alma Hybrid, HyGrid y FemiLift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en los Estados Unidos o en otros países.

PBAH02122001_07

COMUNÍQUESE
CON ALMA

