

Alma

For You. For Life.



Alma PrimeX

For **All** of You

**Una variedad completa de tratamientos
para el cuerpo y el rostro**



Una experiencia superior para todo el cuerpo

Cada elemento y característica del Alma PrimeX™ se diseñó y planificó cuidadosamente para garantizar una experiencia superior de tratamiento para todo el cuerpo, tanto para usted como para sus pacientes.

Al ser un tratamiento totalmente no invasivo, Alma PrimeX es la plataforma para el cuerpo y el rostro que proporciona resultados extraordinarios.

¿Por qué Alma PrimeX?

Una plataforma y 12 aplicadores para el tratamiento de todo el cuerpo y el rostro

Combine el tratamiento preciso con las necesidades y las expectativas de cada paciente

Funciones avanzadas de ultrasonido y radiofrecuencia

Funciones sinérgicas que ofrecen un rendimiento estelar

Un tratamiento con resultados excelentes y duraderos

Dos tecnologías esenciales en una potente combinación

Para obtener resultados más rápidos y duraderos, Alma PrimeX utiliza dos tecnologías en sinergia

US

Ultrasonido

Las ondas ultrasónicas guiadas patentadas de Alma actúan sobre el tejido adiposo y producen una reducción de su volumen, lo que se evidencia en notables resultados clínicos.

RF

Radiofrecuencia

La energía de RF UniPolar calienta eficazmente las capas dérmicas, se dirige a las fibras de colágeno y elastina, activa los fibroblastos y favorece la formación de nuevo colágeno. La exclusiva tecnología AlmaWave de 40,68 MHz permite un calentamiento profundo y homogéneo para obtener resultados de estiramiento visibles y duraderos.




Alma
WAVE



TECNOLOGÍA DE

40,68
MHz

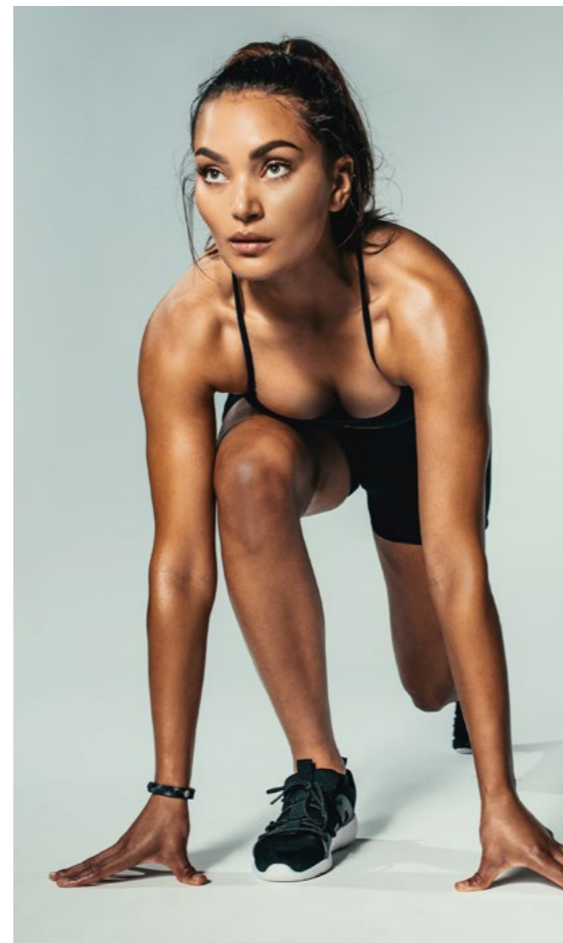

Tratamientos que se adaptan a cada cuerpo

La combinación de tecnologías en el Alma PrimeX permite realizar una serie de tratamientos corporales desde una única plataforma: los ultrasonidos trabajan para reducir las circunferencias al actuar sobre el exceso de depósitos de grasa en brazos, piernas, muslos, nalgas, flancos y abdomen, y la radiofrecuencia trata las estrías, tensa la piel laxa y mejora el drenaje linfático para reducir la apariencia de la celulitis.

Aplicadores para el cuerpo



UltraWave

Perfilado corporal de alta velocidad

UltraWave combina la tecnología de ondas ultrasónicas no focalizadas y una placa aplicadora extragrande para localizar y reducir el volumen de tejido adiposo. Cuatro características revolucionarias que garantizan unos resultados increíbles:

ConeX amplifica las ondas acústicas y disminuye el reflejo de las ondas ultrasónicas.

Impulse aplica los ultrasonidos en impulsos para que el tratamiento sea más eficaz.

MaXimize utiliza una función de vacío para mantener un acoplamiento continuo entre el aplicador y la piel, para una aplicación de ultrasonidos óptima y uniforme.

ReACCT controla la salida de energía en función de las características del tejido tratado, lo que permite una optimización sistemática.



UniBody

Perfilado corporal, estiramiento y mejora de la celulitis

Al combinar la tecnología de radiofrecuencia UniPolar con un cabezal de masaje giratorio desmontable, este aplicador proporciona calor dérmico a cuatro profundidades diferentes de la dermis, lo que activa la restauración del colágeno.



Xcentuate

Perfilado corporal en grandes áreas

El Xcentuate emite energía de radiofrecuencia a través de dos aplicadores independientes, de manos libres y temperatura regulable, y de un mecanismo de enfriamiento que elimina el calor de la superficie de la piel.



Un nuevo aspecto para el rostro

Alma PrimeX utiliza energía de radiofrecuencia para tensar y estirar, lo que atenúa las líneas de expresión y las arrugas, reafirma la piel y unifica su textura. El ultrasonido se utiliza para eliminar el exceso de grasa, y crea así la combinación óptima para mejorar el aspecto de la piel.

Aplicadores para el rostro




Microplasma

Un método combinado de rejuvenecimiento de la piel

Gracias a la exclusiva tecnología de microplasma de Alma, este aplicador ablaciona y calienta la piel, y logra resultados impresionantes en el rejuvenecimiento de la piel, el tratamiento de cicatrices y el desvanecimiento de las estrías. La energía de radiofrecuencia genera chispas de plasma que crean microcanales en la piel, junto con la coagulación dérmica. Las microperforaciones están rodeadas de piel intacta que ayuda a la regeneración tisular.


Más consejos

En movimiento

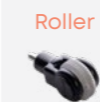

Roller Cuenta con 3 rodillos disponibles con una cantidad diferente de pasadores para diferentes intensidades de energía en función de la afección en tratamiento.

Estacionaria

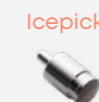

Icepick Indicado para el calentamiento dérmico focalizado y profundo, en especial para el tratamiento de cicatrices de acné y arrugas.



MiniSpeed/SpeedSculpt

Tratamiento de la grasa subcutánea en áreas muy pequeñas

El sonotrodo de 55 mm de diámetro de MiniSpeed, que emite ondas de ultrasonido no focalizadas patentadas en la piel para reducir de forma significativa el volumen del tejido adiposo y perfilar el rostro, se diseñó especialmente para su uso en áreas pequeñas, como la parte posterior de los brazos.

SpeedSculpt, una versión pequeña del MiniSpeed, utiliza un sonotrodo de 40 mm de diámetro, que permite realizar un tratamiento eficaz y seguro de áreas muy pequeñas, como el triángulo submentoniano.



UniLarge

Tensa la piel del rostro y el cuerpo

UniLarge utiliza energía de radiofrecuencia UniPolar para el calentamiento dérmico profundo y la estimulación de la formación de nuevo colágeno. El aplicador cuenta con un termómetro de infrarrojos para garantizar que la piel se mantenga a una temperatura agradable. Existen varias profundidades de penetración del calor para distintos grosores de piel y áreas del cuerpo.

Aplicadores para el rostro



Impact

Mejora la absorción de los productos cosméticos

Este aplicador de administración transepidérmica puede utilizarse por separado o después de un procedimiento de rejuvenecimiento, como un tratamiento con microplasma. La exclusiva tecnología patentada de ultrasonidos no focalizados de baja frecuencia de Alma crea una presión acústica que supera el fluido intracelular en las áreas microtérmicas, lo que favorece la penetración de los productos cosméticos en el tejido.



UniFace

Estiramiento del rostro y reducción de la laxitud

Al combinar la tecnología UniPolar RF con un anillo masajeador giratorio desmontable, este aplicador proporciona un calentamiento dérmico profundo al tiempo que aumenta la circulación en la dermis para tensar la piel y mejorar la laxitud, las arrugas y las rugosidades de la piel del rostro.



CoaxiPolar

Perfilado y estiramiento impresionantes

Gracias a la tecnología de radiofrecuencia bipolar clínicamente probada, este aplicador produce un calentamiento eficaz, local y superficial de la piel en áreas finas y con hueso, lo que estimula la síntesis de nuevo colágeno. Un termómetro de infrarrojos incorporado permite controlar en tiempo real la temperatura de la piel para que el tratamiento resulte agradable.



TuneFace

Estiramiento de áreas pequeñas

Este aplicador basado en radiofrecuencia se diseñó exclusivamente para realizar tratamientos estacionarios de estiramiento de la piel. El mecanismo de vacío asistido facilita una penetración más profunda y su tamaño hace que TuneFace sea ideal para estirar áreas pequeñas del rostro.



Tune Periorbital

Mejora de las arrugas y la laxitud de la piel

Este aplicador, que incorpora tecnología basada en radiofrecuencia y vacío, se diseñó especialmente para tratar áreas pequeñas. Al producir un calentamiento volumétrico del tejido profundo, mejora las arrugas y las líneas de expresión, y trata la laxitud de la piel, especialmente alrededor de los ojos.

Una amplia cartera de tratamientos en una sola plataforma



La combinación de las dos tecnologías en Alma PrimeX demostró excelentes resultados de tratamiento en el perfilado corporal y el estiramiento de la piel, y todo ello en muy poco tiempo. Los distintos protocolos me permiten tratar a cada paciente según sus necesidades concretas, su presupuesto y su deseo de obtener resultados rápidos. Es estupendo para la clínica porque tenemos algo que ofrecer a cada paciente.



Dra. Ines Verner, MD, dermatóloga, Clínica Verner, Israel

Antes


Después de 3 meses



Cortesía de la clínica de Alma

Antes

Después de 1 mes

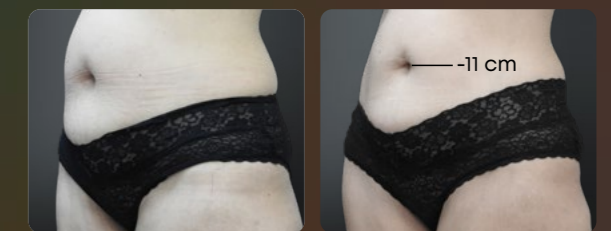

Cortesía de la clínica de Alma

Antes


Luego de 3 tratamientos



Cortesía de la Dra. Kat Lofley, DNP, EE. UU.

Antes

Luego de 4 tratamientos

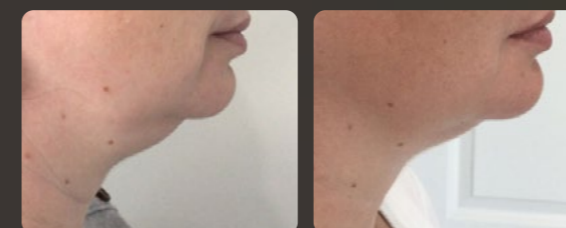

Cortesía de la clínica de Alma, NA



La combinación única de tecnología de ultrasonidos y radiofrecuencia de Alma, junto con la amplia variedad de aplicadores Alma PrimeX, me permite diseñar un tratamiento para el rostro que se adapte con precisión a cada cliente. En un solo procedimiento, puedo tratar múltiples problemas de la piel, como la textura, la laxitud y el tono, y obtener un rostro de aspecto más joven. Esta es una oferta extraordinaria para mí y mis pacientes.



Cortesía del Dr. Fernando Urdiales, MD
Director del Instituto Médico Miramar, España



Alma PrimeX

For **All** of You

El cambio es un proceso natural, pero no siempre se produce de acuerdo con nuestras expectativas. Es entonces cuando la tecnología de Alma nos devuelve el control. Como líderes en el campo de la estética médica, capacitamos a miles de médicos para que ayuden a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada paciente. Nuestra experiencia clínica, nuestro servicio especializado y nuestro apoyo comercial, así como nuestros innovadores desarrollos tecnológicos, forman un sistema de apoyo integral del que usted podrá beneficiarse. En un mundo en continuo cambio, una cosa permanece constante: los pacientes necesitan saber que están recibiendo la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. Nuestras soluciones en sus manos lo hacen posible.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Alemania
Tel.: + 49 911/89 11 29-0
Fax: + 49 911/89 11 29-99

Correo electrónico: info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2023 Alma. Todos los derechos reservados.

Alma, el logotipo de Alma, Alma PrimeX, AlmaWave, Impact, Microplasma, TuneFace, UltraWave, Unipolar y Xcentuate son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en EE. UU. o en otros países.

*Patentes de EE. UU.: www.almainc.com/patents

COMUNÍQUESE
CON ALMA



PBAP16042302_01