



 **BeautiFill**
Made by LipoLife

SOLUCIÓN COMPLETA, TODO EN UNO

SISTEMA COMPACTO, PORTÁTIL E INNOVADOR

ELEVADO RETORNO DE LA INVERSIÓN, SOLUCIÓN AMBULATORIA

Alma

Liposucción de última generación

BeautiFill™ es la primera tecnología con láser que estandariza el proceso, el tiempo y la calidad de los métodos de extracción de grasa con la mínima alteración adiposa.

Las funcionalidades de extracción de grasa en circuito cerrado de BeautiFill combinan láser, aspiración y procesamiento en un simple paso. Esto reduce el tiempo del procedimiento de extracción y optimiza todo el proceso de extracción de grasa.

El uso de láser y la succión simultáneos simplifican el procedimiento y reducen significativamente el tiempo de tratamiento.

La solución completa para la reducción de grasa localizada en pacientes con sobrepeso

Una de las características novedosas de BeautiFill es su fibra de punta radial patentada encerrada en una cánula roma Mercedes. Este diseño permite una emisión radial de 360° de baja densidad de potencia, que direcciona el agua y crea selectivamente un entorno térmico que ablanda y desprende la grasa para separarla sin esfuerzo durante la aspiración simultánea.

En un estudio controlado, los resultados de BeautiFill indicaron una reducción de la grasa localizada en pacientes con sobrepeso.

“El sistema LipoLife de última generación de Alma fue un gran avance para la rutina de liposucción de mi clínica. El uso de láser y la succión simultáneos reducen significativamente el tiempo de tratamiento y hacen que los procedimientos sean mucho menos exigentes a nivel físico. El sistema es compacto y tiene todos los equipos y accesorios que necesitamos, lo cual nos permite ahorrar espacio sin sacrificar la practicidad”.

*Dr. Alex Levenberg, cirujano plástico
Centro Médico Sourasky*



Láser y succión simultáneos

LipoLife cuenta con una interfaz integrada de cánula y fibra que permite la succión y el uso de un láser de forma simultánea. Esta interfaz única permite a los médicos atravesar el tejido con mayor facilidad y eliminar las células adiposas con rapidez y eficacia.

De este modo, se minimizan el sangrado, la hinchazón y los traumatismos corporales como los hematomas y los edemas, así como el dolor posquirúrgico.

El uso del láser y la succión simultáneos crean un **proceso de un solo paso** mediante el cual se reduce en gran medida el esfuerzo físico necesario para realizar procedimientos de liposucción, especialmente en casos de tejido fibroso como la ginecomastia. Gracias a este mecanismo, el procedimiento se simplifica, se reduce el tiempo total de tratamiento en comparación con otras técnicas basadas en la energía, se evita la fatiga del cirujano (lo que permite realizar más tratamientos al día) y se logran resultados médicos óptimos con menos tiempo de inactividad del paciente.



Procedimiento láser



PROCEDIMIENTO Mecánico

Cortesía del Dr. Alex Levenberg,
cirujano plástico, Centro Médico Sourasky


Sistema de infiltración y succión

El potente y silencioso sistema de aspiración cuenta con tres bombas para un funcionamiento de alta potencia: una bomba peristáltica para la infiltración de mezclas anestésicas intumescentes y dos bombas de aspiración para la succión de tejidos adiposos.

Emisión por fibra Angel™ única y segura para la piel

LipoLife incorpora la exclusiva fibra de emisión radial Angel™ integrada en una cánula Mercedes de punta perforada que emite energía en un patrón de 360°. El láser de emisión radial es un método de baja densidad de potencia con múltiples ventajas:


- Minimiza el riesgo de quemaduras
- Distribuye la energía uniformemente por toda la zona de tratamiento
- Elimina rápidamente las células grasas y abarca una mayor superficie de tejido, lo que permite un tratamiento rápido
- El patrón de emisión radial de la fibra permite un procedimiento seguro, homogéneo y más eficaz

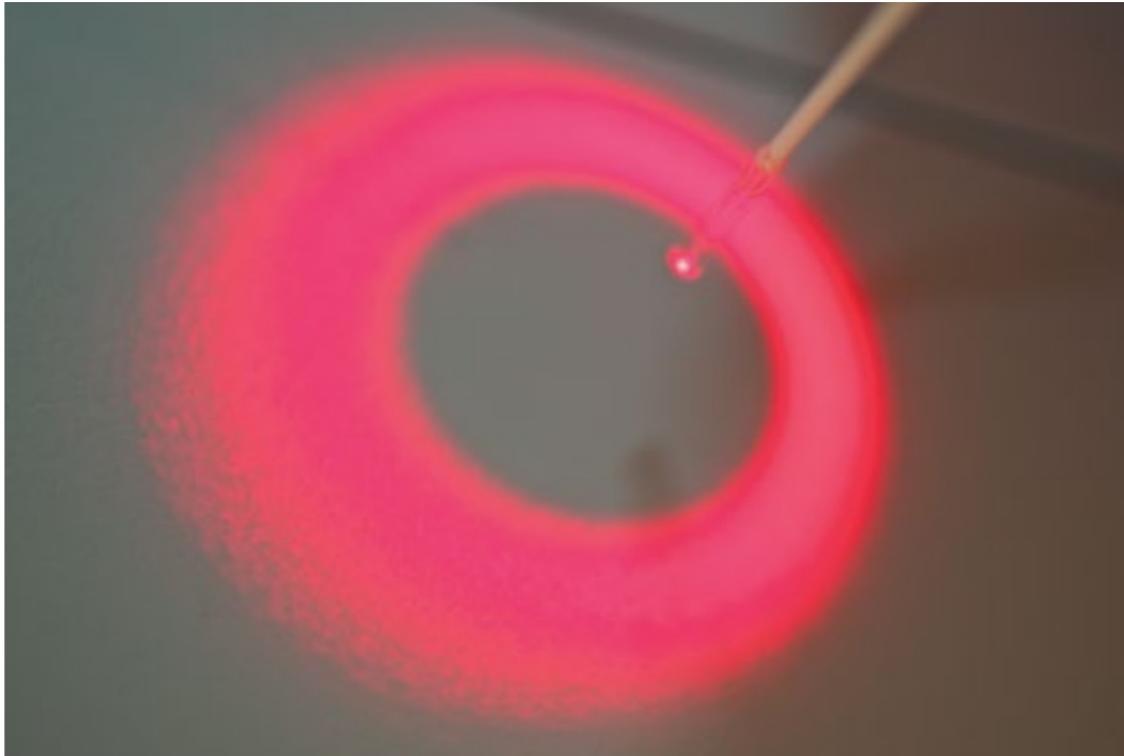

“La integración de la fibra láser de Alma en el procedimiento de liposucción ha abierto una nueva gama de posibilidades de tratamiento en mi consultorio. El diseño único de 360 grados me brinda mayor control y precisión, así como un mayor campo de interacción con el tejido, lo que permite eliminar al máximo el tejido adiposo y estirar la piel de forma simultánea”.

*Dr. Eyal Shapira, cirujano plástico
Centro Médico Assaf Harofeh*

Tecnologías de vanguardia

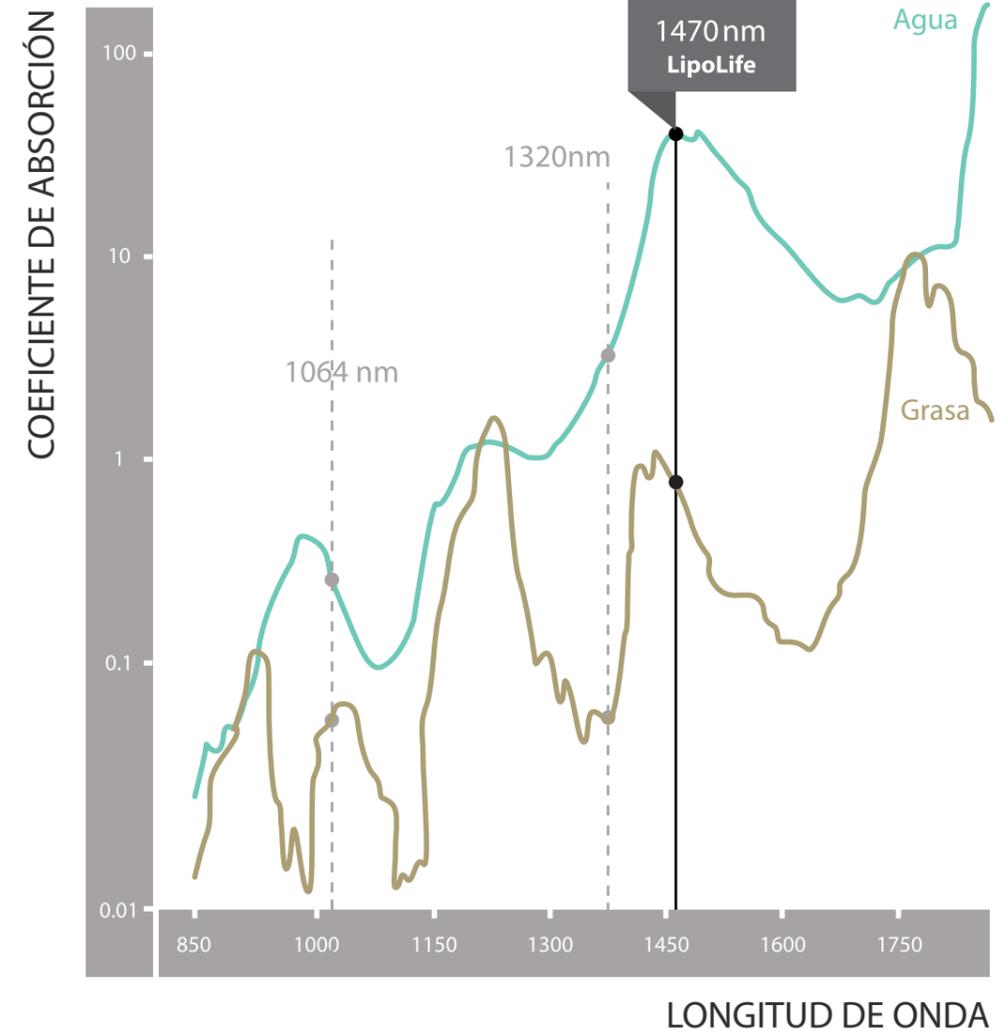

Longitud de onda óptima

LipoLife utiliza la longitud de onda de 1470 nm, que direcciona específicamente el agua a los tejidos blandos y presenta una tasa de absorción superior a la de todos los demás dispositivos de la competencia. Esto permite una eliminación óptima de la grasa con un daño mínimo de los tejidos. La energía del láser se suministra con una baja densidad de potencia para ofrecer la máxima seguridad y reducir al mínimo el riesgo de quemaduras.

1470 nm
LipoLife

Áreas de tratamiento

Diversas zonas del cuerpo se pueden tratar eficazmente con LipoLife. LipoLife simplifica los tratamientos especializados como la ginecomastia.

Una solución completa, todo en uno

El sistema compacto y multimodal de BeautiFill brinda la flexibilidad y la capacidad de respuesta que los médicos necesitan para realizar procedimientos de liposucción en cualquier ámbito, tanto en clínicas privadas como en hospitales. Tanto todas las herramientas y los equipos que se necesitan como un conjunto completo de accesorios están convenientemente organizados en una unidad **portátil silenciosa que funciona con solo conectarla.**

Modalidad de infiltración y succión: bomba peristáltica para infiltración, bomba de aspiración para succión y cánulas de succión. También brinda todos los accesorios necesarios, incluidos un depósito para la recolección de fluidos residuales, un conjunto completo que incluye todos los tubos esterilizados y bolsas de residuos desechables.

Láser y succión simultáneos: dispositivo de diodo de 1470 nm, fibras láser de emisión radial Angel™ de varios diámetros, fibra LipoTight multiuso, con un set para extraer y preparar la fibra.

Aprobado por la FDA y la CE

Beneficios



Solución completa, todo en uno



Elevado retorno de la inversión: múltiples opciones de tratamiento, procedimientos ambulatorios y breve duración del tratamiento para obtener el máximo rendimiento



Unidad compacta, portátil y bien organizada



Sistema adecuado tanto para entornos hospitalarios como ambulatorios privados



Máxima seguridad para el paciente con densidad de láser baja y anestesia local



Alternativa de tratamiento avanzado para aspectos más extensos de la liposucción con dispositivos no quirúrgicos



Liposucción con equipamiento completo



BeautiFill
Made by LipoLife

Alma es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en energía para los mercados quirúrgico, médico-estético y de belleza, al entregar tecnologías de vanguardia a nuestros socios y clientes. Creemos firmemente en el poder de la ciencia, al redefinir la industria a través de un deseo inagotable de innovar e impulsar el avance de la industria global

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102 | 90411 Nuremberg, Alemania
Tel.: + 49 911 89 11 29 0 | Fax + 49 911 89 11 29 99
contact@almasurgical.com
www.almalipolife.com
www.almasurgical.com

© 2024 Alma, Todos los derechos reservados.
Alma, su logotipo, BeautiFill, LipoLife y Lipo Tight son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en los Estados Unidos u otros países. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.



COMUNIQUESE CON ALMA

