

FemiLift

Give Your Feminine Life a Lift

La solución perfecta para el bienestar de la mujer

- Seguro, fácil y eficaz
- Tratamiento breve y mínimamente invasivo
- Mejora el alcance de su consulta y agrega un gran valor al ejercicio de su profesión


Alma
For You. For Life.

El renacimiento de la feminidad

En la vida de una mujer, los cambios fisiológicos, como el parto, las fluctuaciones de peso y los cambios hormonales debido al paso de los años y la menopausia, pueden originar diversas afecciones que podrían perjudicar su calidad de vida, su autoestima y su sexualidad.

El uso del láser en la salud genital femenina evolucionó desde la tradicional ablación de verrugas genitales (condilomas*) hacia una gran variedad de tratamientos que abordan los síntomas posteriores al parto*, a la menopausia y al cáncer, así como las inquietudes estéticas y la mejora de la función sexual*.

FemiLift es una plataforma versátil que permite que los médicos de cabecera traten las distintas indicaciones femeninas de manera rápida y eficaz. Dado que las intervenciones no requieren anestesia general y el tiempo de inactividad es mínimo, las mujeres pueden retomar su rutina y recuperar la confianza en sí mismas poco tiempo después.

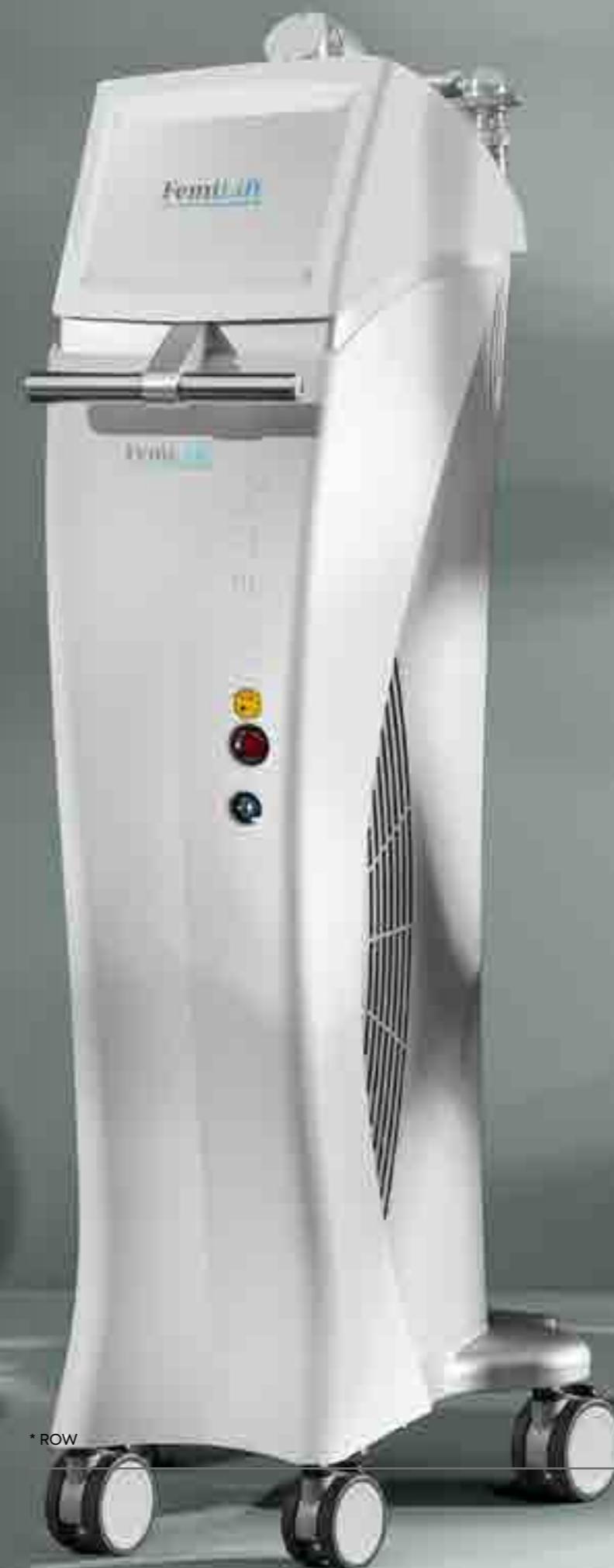

* ROW

FemiLift de Alma

Tecnología de vanguardia

Desde la década de 1960 se usan láseres de CO₂, ampliamente aceptados como el tratamiento de referencia para intervenciones ginecológicas, otorrinolaringológicas y dermatológicas, principalmente debido a sus extraordinarios resultados, que desafían a la edad. Gracias a la potencia, la precisión y la versatilidad de la tecnología láser de CO₂, FemiLift ofrece tres modos de aplicación de energía y una amplia variedad de aplicadores específicos, lo que la convierte en una plataforma de tratamiento completa y eficaz para la salud femenina.

3 modos de funcionamiento

01

Pixel CO₂: aplicación fraccionada de energía

La aplicación fraccionada y de pulso largo único de energía del láser de CO₂ de FemiLift permite el uso de niveles de energía altos mediante duraciones de pulso más prolongadas para lograr un poderoso e impactante efecto térmico. La energía del láser de CO₂ se aplica al tejido vaginal a través de un elemento óptico difractivo (DOE, por sus siglas en inglés) que pixela el haz en 81 píxeles microscópicos en un patrón de 9 x 9.

Junto con columnas térmicas microscópicas, se consigue una ablación fraccionada suave que penetra profundamente en la submucosa, lo que deja intacto el tejido circundante. Esto permite acelerar el proceso de cicatrización de las heridas, al tiempo que estimula la síntesis de colágeno nuevo y la neovascularización como parte del proceso de regeneración del tejido.

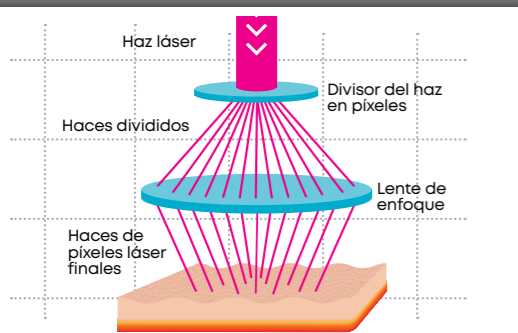


Figura A: La energía del láser de CO₂ se aplica al tejido vaginal mediante un patrón de píxeles, lo que favorece una cicatrización y una neovascularización más rápidas.

02

Corte y coagulación: aplicación focalizada de energía

FemiLift combina los modos de funcionamiento de corte y coagulación en un único entorno sinérgico, de forma que los médicos pueden realizar ambas acciones sin tener que alternar los aplicadores ni cambiar los parámetros durante los procedimientos. El modo de corte y coagulación es altamente eficaz en las aplicaciones quirúrgicas que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la coagulación del tejido.

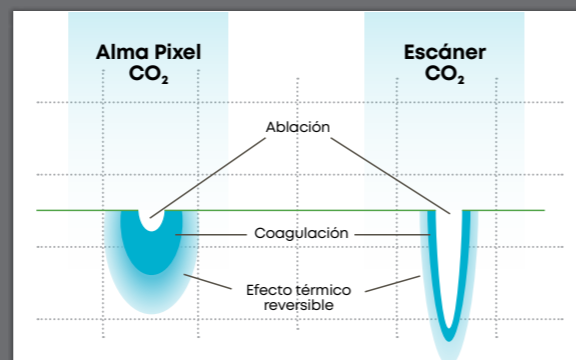


Figura B: El láser de CO₂ logra un efecto térmico profundo que favorece la remodelación del colágeno vaginal.

03

Aplicación de energía térmica

FemiLite es un modo de tratamiento novedoso diseñado específicamente para pacientes que padecen atrofia vaginal grave y dolor intenso. El tratamiento, administrado mediante aplicadores FemiLift, emplea energía de baja potencia y alta frecuencia de repetición, lo que se traduce en un tratamiento suave y poco doloroso.



FemiLift ofrece una amplia variedad de aplicaciones ginecológicas

” FemiLift brinda un alto nivel de satisfacción en las pacientes y una pronta recuperación. Es un procedimiento muy aceptado por las pacientes que buscan un tratamiento de primera calidad, eficiente y con resultados superiores y duraderos. ”

Dr. Alexander Bader, FAAOCG.

Ginecólogo especialista en reconstrucción y estética de la Junta Europea de Obstetricia y Ginecología. Fundador y presidente de la Sociedad Europea de Ginecología Estética (ESAG), Londres, Dubái y Atenas


Aplicadores FemiLift y FemiLift Slim

Diseñados para usarlos en los modos de aplicación de energía fraccionada y de baja potencia y alta frecuencia de repetición para el tratamiento de las siguientes afecciones:

Síndrome genitourinario de la menopausia / Atrofia vaginal | Incontinencia urinaria de esfuerzo | Atrofia grave y dolor intenso*

FemiLift (diámetro: 28 mm)

El aplicador FemiLift presenta un diseño exclusivo para adaptarse a distintos tamaños de vagina y garantizar la máxima comodidad de la paciente. Durante el tratamiento, el médico gira el aplicador en un patrón de 360 grados para cubrir toda la pared vaginal, y logra así un alcance y una eficiencia óptimas.

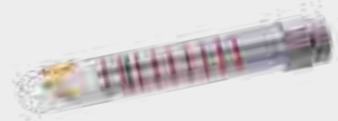


FemiLift Slim (diámetro: 18 mm)

El diseño del aplicador FemiLift Slim se adapta a mujeres con estructuras anatómicas más estrechas por naturaleza y a aquellas que experimentaron cambios anatómicos o histológicos, como atrofia vaginal o daños en el tejido derivados de tratamientos oncológicos.



Funda higiénica desechable de FemiLift

Compatible con los aplicadores FemiLift y FemiLift Slim.

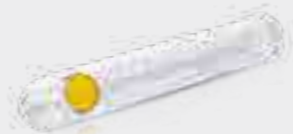

Aplicadores Focus

Usan el modo de aplicación de energía de corte y coagulación para el tratamiento de indicaciones quirúrgicas que requieren la escisión, la incisión, la ablación y la coagulación de tejido.

Focusing (50 mm y 100 mm)

El punto focal a una distancia de 50 mm y 100 mm proporciona un tamaño de punto de haz de 0,125 mm y 0,20 mm, respectivamente.



Aplicador LiteScan

Combina múltiples opciones de exploración que incluyen el rejuvenecimiento con patrón fraccional para el tratamiento de la laxitud cutánea, la pigmentación y el liquen escleroso.

Es un escáner láser controlado por un microprocesador que optimiza los procedimientos a través de configuraciones automáticas de los parámetros del haz láser. El aplicador permite una ablación superficial sin carbonización y la incisión y escisión de tejidos con varios modos y opciones de exploración.



* ROW



“ FemiLift es un tratamiento médico ambulatorio novedoso con excelentes resultados que está abriendo el camino a nuevas opciones de tratamiento quirúrgico ambulatorio seguras y eficaces. ”

Prof. Paolo Scollo.
Presidente de S.I.G.O., Roma, Italia

Valor agregado para su consulta:

- Acceda a un mercado nuevo y rentable de remodelación vaginal*
- Plataforma versátil con alto retorno sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés): múltiples indicaciones de salud femenina y cirugía estética
- Exclusivo modo no ablativo
- Tecnología de píxeles única

“ La evaluación de los factores del estudio indica que el costo de un láser equivale a un promedio de 10 a 20 cirugías, según el país. ”

Dr. Jorge Alberto Elías.

Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso Pelviano y la Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina

Una vida femenina más plena para sus pacientes:

- Tratamiento de diversas indicaciones de la salud femenina
- Tratamientos cortos y seguros
- Tiempo de inactividad mínimo

* ROW

Somos una empresa líder en el campo de la estética médica que permite que miles de médicos ayuden a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada persona que acude a su consulta. En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los pacientes esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. Cuando nuestra solución está en sus manos, esa promesa se hace realidad.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nuremberg, Alemania
Tel.: + 49 911/89 11 29-0
Fax + 49 911/89 11 29-99

Correo electrónico: info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2024 Alma. Todos los derechos reservados. Alma, su logotipo y FemiLift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en Estados Unidos o en otros países.

PBFL29081901_04

COMUNÍQUESE CON ALMA

