
Soprano Titanium

Más potente, más rápida,
más inteligente.

La **reinención** de la depilación.



Presentamos **Soprano Titanium**

Una plataforma de depilación innovadora que combina la máxima funcionalidad con una comodidad sin precedentes. Gracias al gran tamaño de punto de 4 cm² y a su avanzado sistema de enfriamiento, ahora los tratamientos son mucho más rápidos e indoloros, lo que supone una mejora notable tanto para los pacientes como para los profesionales. Soprano Titanium aprovecha las ventajas de tres longitudes de onda combinadas, mejora la experiencia del paciente y adopta un enfoque empresarial, lo que proporciona una solución novedosa, única y orientada a la obtención de resultados para la depilación profesional.



Aspectos destacados del sistema Titanium

✓ Tamaño de punto excepcionalmente grande

¡Un 40 % más rápido!

Soprano Titanium incorpora TRIO 4 cm², un nuevo aplicador exclusivo y eficaz con un tamaño de punto especialmente grande de 4 cm², capaz de operar en una cuadrícula de 600 cm cuadrados. Este aplicador de avanzada permite realizar tratamientos mucho más rápidos y prácticamente indoloros, lo que reduce en gran medida el tiempo de tratamiento y garantiza una experiencia más cómoda para los pacientes.

✓ Conector doble

Más flexibilidad. Menos complicaciones.

Soprano Titanium es la primera versión de los sistemas de depilación Soprano que incluye dos conectores, lo que permite la conexión permanente de dos aplicadores diferentes a la plataforma. Esta característica ofrece una mayor flexibilidad, a la vez que elimina el tiempo destinado a cambiar de aplicador durante los tratamientos.

✓ ICEPlus*

Enfriamiento continuo por contacto

ICE Plus es una tecnología avanzada que enfría la piel de forma continua y facilita el control de la temperatura por rangos durante todo el tratamiento. La punta de zafiro frío ICE Plus™ reduce al mínimo los riesgos epidérmicos al tiempo que mantiene el calor dentro de la dermis, donde se tratan los folículos pilosos. La temperatura permanece controlada y constante, lo que contribuye a la eficacia del diodo. Ahora los pacientes pueden disfrutar de una experiencia prácticamente indolora, cómoda y agradable durante toda la sesión.

✓ Pantalla Android de 15 pulgadas

Fácil de usar y funcional


La nueva pantalla Android de 15" de gran tamaño, con parámetros preestablecidos, ofrece a los profesionales una experiencia de trabajo más intuitiva y amigable.



Smart **Clinic**

Gestione su clínica. Maximice su potencial.

Smart Clinic es una herramienta pionera de desarrollo empresarial basada en la nube que ofrece acceso permanente a la información en tiempo real a través de una aplicación y una plataforma en línea. Permite mejorar los procesos de gestión de forma sencilla y fluida, ya que refleja en tiempo real el estado de las plataformas, los aplicadores y la productividad, para que pueda acceder a los datos y realizar ajustes sin perder tiempo. Smart Clinic impulsa la optimización y la estandarización, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y estadísticas reales, y no en conjeturas. También favorece los esfuerzos de marketing ya que ofrece notificaciones de lanzamientos, nuevos productos, invitaciones a eventos y mucho más.

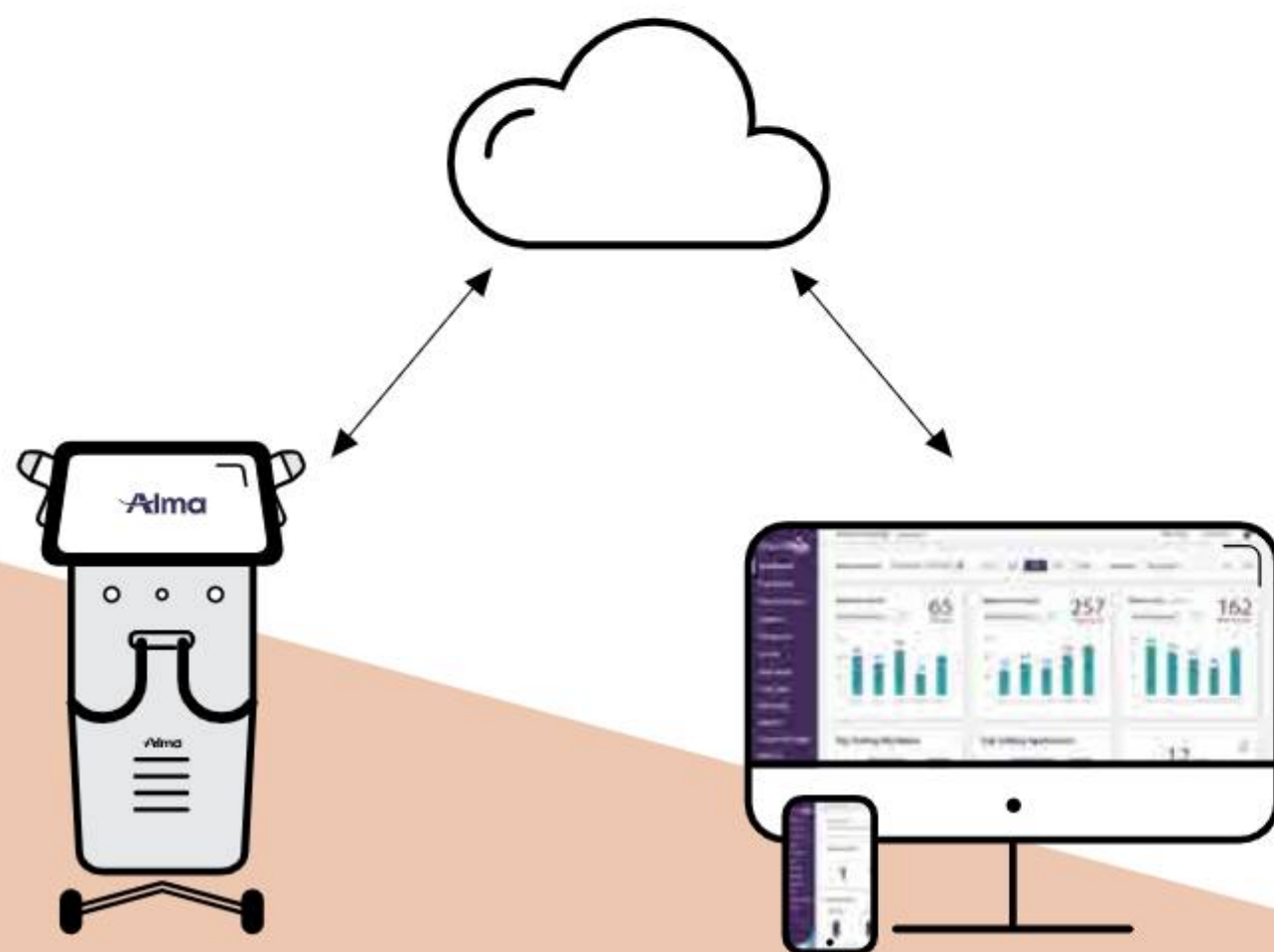

No se pierda nada

Smart Clinic es una solución polifacética que proporciona una visión completa de su negocio, ya sea que se trate de una única clínica o de una cadena.

Gestión de tratamientos | Documente y registre los tratamientos de forma automática, incluidas las áreas tratadas, los parámetros utilizados y la fecha de la visita.

Plataformas y aplicadores | Le permite ver el número de pulsos, el tiempo de operación, las áreas tratadas y el número de plataformas y aplicadores que utiliza cada profesional en cada momento. Estos datos son fundamentales para las modificaciones continuas en los equipos de su clínica y para recopilar estadísticas de funcionamiento (por plataformas, aplicador y clínica), realizar un seguimiento del desempeño de los profesionales y mejorar la gestión de los recursos humanos.

Mantenimiento y servicio | Smart Clinic le permite realizar una solicitud de servicio en cualquier momento a través de la aplicación, y le envía una guía de solución de problemas para que pueda resolverlos cuando surjan. Ofrece la posibilidad de supervisar los tratamientos y ver las estadísticas de cada máquina para evitar el uso excesivo o la falta de uso, hacer un seguimiento de los errores y recibir alertas permanentes de mantenimiento (agua/filtros). Con Smart Clinic, podrá evitar los tiempos de inactividad, gestionar sus recursos de forma más eficiente e incrementar la productividad.






Tecnologías sinérgicas. Resultados superiores.

La técnica SHR™, la innovadora depilación patentada de Alma es el único método de depilación láser clínicamente probado que es prácticamente indoloro, además de ser el más seguro para todo tipo de pieles, incluidas las pieles oscuras y bronceadas. Su exclusivo método de calentamiento gradual y administración de pulsos de alta frecuencia destruye eficazmente el folículo piloso e impide que vuelva a crecer, al tiempo que evita daños en el tejido circundante. SHR™ protege la melanina de la piel con un método exclusivo, lo que permite realizar el procedimiento en todo tipo de pieles en cualquier momento del año, incluso en pieles bronceadas.

Tecnología 3D



Con su exclusiva tecnología 3D, Soprano Titanium combina las tres longitudes de onda láser más eficaces en un único aplicador, lo que permite tratar simultáneamente diferentes profundidades de tejido y estructuras anatómicas dentro del folículo piloso. Al combinar los niveles de absorción y penetración de diferentes longitudes de onda, junto con una cobertura de tratamiento ampliada, una mayor comodidad y pocos requisitos de mantenimiento, Soprano Titanium es el tratamiento de depilación más seguro y eficaz disponible en la actualidad. Tecnología 3D para una solución de depilación superior.

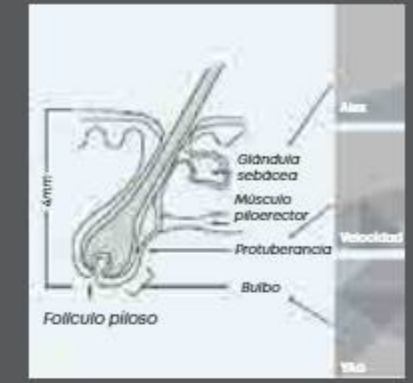

755 nm El láser Alex de 755 nm de longitud de onda ofrece una potente absorción por el cromóforo melanina. Esto hace que los 755 nm sean una longitud de onda ideal para la eliminación del vello fino y de color claro.

810 nm La longitud de onda de 810 nm es el valor de referencia para la depilación láser. Al tener una buena absorción en la melanina y una penetración relativamente profunda, equilibra la seguridad con la eficacia.

1064 nm La longitud de onda de 1064 nm se caracteriza por una menor absorción de melanina, lo que la convierte en una solución perfecta para las pieles más oscuras. La longitud de onda de 1064 nm también ofrece una penetración profunda en el bulbo y la papila del folículo piloso. Gracias a la absorción de agua y hemoglobina, la longitud de onda de 1064 nm eleva el perfil térmico del tratamiento global, lo que permite realizar una depilación muy eficaz, especialmente en los folículos pilosos profundos.

Los aplicadores de Titanium



TRIO 4cm²

¡Con tecnología 3D y un 40 % más rápidos!

Este exclusivo aplicador es un recurso valioso para cualquier clínica. Con su gran tamaño de punto de 4 cm² y la incorporación de tres longitudes de onda, facilita una mayor cobertura del tratamiento para reducir de forma significativa el tiempo de tratamiento y proporcionar a los pacientes un proceso más sencillo y seguro. Con el aplicador TRIO 4 cm², la depilación es rápida, eficaz y cómoda.



TRIO: tres en uno

Este aplicador permite la administración de tres longitudes de onda de gran eficacia en una sola, por lo que resulta adecuado para todo tipo de pieles. Al cubrir un tamaño de punto de 2 cm², actúa simultáneamente en diferentes profundidades de tejido y estructuras anatómicas del folículo piloso, lo que aumenta la eficacia del tratamiento.



SPEED™ 810

Incorpora una longitud de onda altamente eficaz y segura en un cómodo tamaño de punto de 2 cm.



ALEX 755

Su potente absorción, combinada con un enfriamiento continuo, permite tratar el vello claro y fino de los tipos de piel I-V.



COMPACT 810

Con una longitud de onda muy eficaz y segura, el tamaño del punto de 1 cm permite tratar con comodidad las áreas pequeñas.



FACIAL TIP

Facilita el tratamiento en áreas que habitualmente son difíciles de abarcar, como las orejas, los orificios nasales y la glabella.

Beneficios de la plataforma



GRAN TAMAÑO DE PUNTA DE 4 cm² PARA TRATAMIENTOS RÁPIDOS



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CONTINUO ICE PLUS™



DOS CONECTORES



CENTRO DE DATOS SMART CLINIC



TECNOLOGÍA 3D CLÍNICAMENTE PROBADA



PANTALLA GRANDE (ANDROID DE 15"), INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR CON PARÁMETROS PREESTABLECIDOS



TONOS DE PIEL TIPOS I-VI Y PIEL BRONCEADA



SIN CONSUMIBLES

Alma Air

Teniendo en cuenta la naturaleza de su profesión, así como la necesidad de alcanzar niveles superiores de comodidad y movimiento, desarrollamos Alma Air, un cinturón ajustable diseñado para que pueda transportar los aplicadores de Alma mientras trabaja. Alma Air alivia la carga de su espalda y le permite hacer su trabajo de forma fácil y sin esfuerzo.

Su diseño funcional elimina la necesidad de sujetar el cordón umbilical mientras trabaja para que no tenga que cargar con un peso excesivo. Práctico, cómodo y fabricado con un material respirable para evitar la sudoración, Alma Air protege su espalda y contribuye a la eficacia de su clínica.

Estoy muy satisfecho con los resultados que puedo conseguir con el dispositivo Soprano Titanium. Además del historial de alta eficacia y seguridad, que son la base de cualquier tratamiento de depilación, ofrece características adicionales, como Smart Clinic y el exclusivo aplicador TRIO 4 cm², que lo sitúan por encima de cualquier otro sistema del mercado actual.

Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Director Médico de Elite Laser Clinic & Laser Unit en el Hospital de NISA, Madrid, España.



Soprano Titanium

Hair Removal, **Reinvented.**

Alma
For You. For Life.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90471 Nuremberg, Alemania
Tel. + 49 911/89 11 29-0
Fax + 49 911/89 11 29-99

Correo electrónico:
info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2023 Alma. Todos los derechos reservados.

Alma, su logotipo, Soprano Titanium, TRIO, ICE Plus, Smart Clinic, SHR y Speed son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en Estados Unidos o en otros países.

PBSP25081901_05

COMUNÍQUESE CON ALMA

