

— El —  
**tratamiento  
de depilación  
láser más  
rápido  
del mercado\***



# **Soprano** Titanium *Special Edition*

\* Validado por "Sapio Research", una agencia de investigación global independiente, en comparación con marcas líderes de depilación láser mundiales.

# La remasterización de la depilación. **Ahora, incluso más rápido.**




Diseñado para lograr una eficiencia nunca antes alcanzada, la edición especial de Soprano Titanium reduce los tiempos de tratamiento a una fracción de lo que podría esperar.

# 20%

de incremento de velocidad\* : no es solo una mejora, **es algo revolucionario.**

Con la revolucionaria tecnología de Alma, la edición especial de Soprano Titanium aprovecha los beneficios de tres longitudes de onda combinadas para llevar el concepto de velocidad a un nivel completamente nuevo. Esta revolucionaria plataforma le permite tratar a sus pacientes en sesiones más breves, en las que los beneficios son que ellos estarán encantados y usted le dará una ventaja competitiva a su consultorio.

\* Válido en el modo SHR In-Motion y los niveles de alta intensidad.

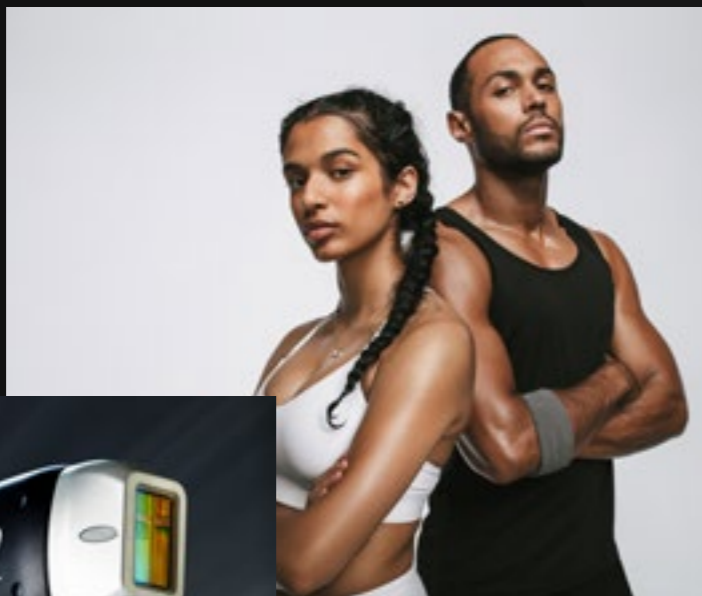

## ¿Está preparado para **MAXimizar** los resultados?

**Trio MAX** es un revolucionario aplicador diseñado completamente en torno de la velocidad, eficiencia y una experiencia inigualable para el paciente.

Este aplicador único cuenta con un tamaño de punto de 4 cm<sup>2</sup> que ofrece un aumento impresionante de hasta 20 % en la velocidad de tratamiento\*. Además, la entrega óptima de la óptica y mejor eficiencia en sesiones avanzadas mejora aún más su rendimiento a niveles sin precedentes. Trio Max también cuenta con un sistema de refrigeración distintivo que garantiza que los tratamientos sean prácticamente indoloros.




\* Válido en el modo SHR In-Motion y los niveles de alta intensidad.

# Tecnologías sinérgicas. Resultados superiores.

## SHR

La edición especial de Soprano Titanium cuenta con la tecnología SHR exclusiva de Alma, el único método de depilación láser clínicamente probado que es prácticamente indoloro. Su combinación única de calentamiento gradual, entrega de pulsos de alta frecuencia y potente enfriamiento permite realizar tratamientos eficaces y cómodos para todos los tipos de piel.

## 3D - Exclusiva tecnología de longitud de onda triple

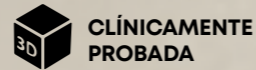

En la primera solución en combinar las tres longitudes de onda óptimas de 755 nm, 810 nm y 1064 nm en una emisión simultánea, 3D se dirige a diferentes profundidades y estructuras de tejido dentro del folículo para lograr máximos resultados.

## ICE Plus™

Esta tecnología avanzada enfría la piel de forma continua y facilita el control de la temperatura por rangos durante todo el tratamiento. Los pacientes disfrutan de una experiencia prácticamente indolora, cómoda y agradable durante toda la sesión.



## LAS LONGITUDES DE ONDA

### 755 nm

En función del láser Alex, la longitud de onda de 755 nm ofrece una potente absorción por el cromóforo melanina. Esto hace que esta sea una longitud de onda ideal para la eliminación del vello fino y de color claro.

### 810 nm

La buena absorción en la melanina y una penetración relativamente profunda proporcionan un equilibrio entre seguridad y eficacia.

### 1064 nm

Caracterizada por una menor absorción de melanina, la longitud de onda de 1064 nm es una solución ideal para tonos de piel más oscuros. También ofrece una penetración profunda en el bulbo y la papila del folículo piloso. Gracias a la absorción de agua y hemoglobina, la longitud de onda de 1064 nm eleva el perfil térmico del tratamiento global, lo que permite realizar una depilación muy eficaz, especialmente en los folículos pilosos profundos.



Administre su  
clínica.

**Maximice  
su potencial.**

Smart Clinic, una herramienta comercial digital basada en la nube, le ofrece acceso continuo a datos y análisis en vivo desde cualquier dispositivo. Obtenga valiosas percepciones sobre el rendimiento de la plataforma, la eficiencia de los tratamientos, el retorno de la inversión y más para optimizar su profesión.



## Aplicadores adicionales



### TRIO 4 cm<sup>2</sup>

Con su gran tamaño de punto de 4 cm<sup>2</sup> y la incorporación de tres longitudes de onda, este aplicador aumenta la cobertura de tratamiento y proporciona a los pacientes un proceso más sencillo y seguro. Con el aplicador TRIO 4 cm<sup>2</sup>, la depilación es rápida, eficaz y cómoda.



### TRIO: tres en uno

Este aplicador permite la administración de tres longitudes de onda de gran eficacia en una sola, por lo que resulta adecuado para todo tipo de pieles. Al cubrir un tamaño de punto de 2 cm<sup>2</sup>, actúa simultáneamente en diferentes profundidades de tejido y estructuras anatómicas del folículo piloso, lo que aumenta la eficacia del tratamiento.



### SPEED™ 810

El aplicador Speed 810 incorpora una longitud de onda altamente eficaz y segura en un cómodo tamaño de punto de 2 cm<sup>2</sup>.



### ALEX 755

Con una potente absorción, combinada con el enfriamiento continuo, el aplicador Alex 755 permite el tratamiento del vello claro y fino para los tipos de pieles I-V.



### FACIAL TIP

Facilita el tratamiento en áreas que habitualmente son difíciles de abarcar, como las orejas, los orificios nasales y la glabella, con la punta facial precisa.



# Soprano Titanium *Special Edition*

Somos una empresa líder en el campo de la estética médica que permite a miles de médicos ayudar a millones de pacientes a experimentar transformaciones realmente notables. Alma le permite ofrecer el tratamiento más eficaz, rápido y seguro posible a cada persona que acude a su consulta. En un mundo que evoluciona constantemente, hay algo que no cambia: los pacientes esperan recibir la mejor atención posible antes, durante y después del tratamiento. Cuando nuestra solución está en sus manos, esa promesa se hace realidad.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102  
90411 Nuremberg, Alemania  
Tel.: + 49 911/89 11 29-0  
Fax: + 49 911/89 11 29-99

Correo electrónico:  
info@almalasers.com

[www.almalasers.com](http://www.almalasers.com)

© 2024 Alma. Todos los derechos reservados.  
Alma, su logotipo, Soprano Titanium, TRIO, Trio MAX, ICE Plus, Smart Clinic, SHR y Speed son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Alma en Estados Unidos o en otros países.

PBST26122315\_01

COMUNÍQUESE CON ALMA

